

Clearblue®

Zwangerschapstest

Digitaal Ultravroeg



Voor zelf testen. Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u begint met testen.



Test vanaf
6 dagen
voor

uw gemiste menstruatie!



Als u vroeg test, moet u de eerste urine van de dag gebruiken
Anders kunt u ieder moment van de dag testen



Drink niet heel veel voordat u de test uitvoert



Houd de test zo vast dat het uiteinde nooit omhoog wijst

1 De test uitvoeren

Neem het teststaafje uit de folie, verwijder het kapje en gebruik het direct. **Ofwel** testen:



in uw
urinestraal



tot hier
indompelen




in een
opgevangen
urinemonster

Haal het absorberende uiteinde uit de urine zodra het stoplicht **BEGINT te knipperen.**

Dit duurt meestal ongeveer 5 seconden. Het lampje blijft nog kort knipperen en wordt daarna uitgeschakeld. Houd het absorberende uiteinde omlaag, plaats het kapje terug en leg het teststaafje plat neer.

2 Wachten


Het aftelscherm wordt weergegeven in het display en elk segment verschijnt opeenvolgend om de voortgang van de test aan te geven.

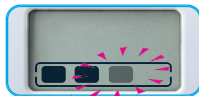

Zie 'Testfouten' als het aftelscherm niet wordt weergegeven.


3 Uw uitslag aflezen

Het aftelscherm wordt binnen 1 tot 5 minuten afgesloten, waarna uw uitslag op het scherm wordt weergegeven.

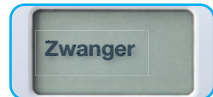

U weet meer dan 99% zeker dat u zwanger bent, ongeacht wanneer u de test uitvoert.

Ga voor meer informatie naar vraag 1.

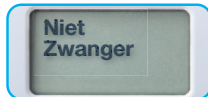

Als u vroeg hebt getest, is er nog steeds een kans dat u zwanger bent, aangezien de hoeveelheid hormoon tijdens de vroege zwangerschap snel toeneemt.

Ga voor meer informatie naar vraag 2.

Veelgestelde vragen

1 De uitslag is 'Zwanger'. Wat moet ik doen?

Maak een afspraak met uw huisarts. Hij of zij kan u vertellen wat u vervolgens moet doen.

Het is mogelijk dat u een positieve uitslag krijgt en later ontdekt dat u niet meer zwanger bent. Zie hierover vraag 6.

De uitslag 'Zwanger' blijft maximaal een maand zichtbaar op het scherm.

2 De uitslag is 'Niet Zwanger'. Wat betekent dit?

Mogelijk bent u niet zwanger of is de hoeveelheid zwangerschapshormoon te laag om te detecteren.

Test over drie dagen opnieuw. Als deze test opnieuw de uitslag 'Niet Zwanger' oplevert en uw menstruatie is nog steeds niet begonnen, neemt u contact op met uw huisarts.

3 Hoe vroeg kan ik testen?

Deze test kan vanaf 6 dagen voor uw gemiste menstruatie worden gebruikt (5 dagen voordat uw menstruatie zou moeten beginnen).

Als het resultaat 'Zwanger' is, weet u meer dan 99% zeker dat u zwanger bent, ongeacht wanneer u de test uitvoert.

Het resultaat kan echter negatief zijn, terwijl u wel zwanger bent. Dit komt doordat de hormoonniveaus voor vrouwen kunnen verschillen en in het begin van de zwangerschap zeer laag kunnen zijn.

In de onderstaande tabel wordt het percentage weergegeven van zwangerschappen die bij laboratoriumtests werden gedetecteerd met urinemonsters van een vroege zwangerschap:

Dagen voor uw gemiste menstruatie	-1	-2	-3	-4	-5	-6
Gedetecteerde zwangerschappen	>99%	>99%	>99%	99%	93%	78%

4 Hoe werkt Clearblue?

De test detecteert het zwangerschapshormoon (hCG humaan choriongonadotrofine) in urine. De testgevoeligheid bedraagt 10 mIU/ml. De test is bij laboratoriumtests meer dan 99% nauwkeurig vanaf de dag waarop uw menstruatie zou moeten beginnen.

5 Kan medicatie of een medische aandoening een invloed hebben op de uitslag?

Lees voordat u de test gaat uitvoeren altijd ook de instructies van de fabrikant van eventuele medicatie die u gebruikt. Onterecht positieve uitslagen kunnen worden veroorzaakt door medicatie die hCG bevat en door bepaalde zeldzame medische aandoeningen. Een buitenbaarmoederlijke of recente zwangerschap (zelfs als de zwangerschap niet is voldragen) kan misleidende uitslagen opleveren.

Als u (bijna) in de menopauze bent, kunt u ook een positieve uitslag krijgen terwijl u niet zwanger bent.

De test zou **NIET** moeten worden beïnvloed door hormoonbehandelingen met clomifencitraat, reguliere pijnstillers, alcohol, antibiotica of de anticonceptiepil. Als u een onverwachte uitslag krijgt, dient u deze te bespreken met uw huisarts.

6 Ik kreeg eerder de uitslag 'Zwanger', maar ik heb opnieuw getest en ik krijg nu een negatieve uitslag, of mijn menstruatie is begonnen. Wat betekent dit?

Het is mogelijk dat u een positieve uitslag krijgt en later ontdekt dat u niet meer zwanger bent. Dit heet 'vroeg zwangerschapsverlies'. Het is helaas niet ongewoon en komt voor bij 1 op de 4 zwangerschappen. Gelukkig kunnen de meeste vrouwen daarna een gezonde zwangerschap hebben.

Uw test weggooien

Verwijder de batterijen voordat u het teststaafje weggooit. Het afvoeren van de batterij moet gebeuren in overeenstemming met de juiste procedure voor recycling. Verwijder de batterij door **de gebogen rand van het kapje** in de zijkant van het teststaafje te steken en te draaien om het teststaafje te openen. **Let op:** Batterijen niet demonteren, niet opnieuw opladen en niet in het vuur werpen. Voer de resterende delen van het teststaafje af conform de juiste procedure voor recycling van elektrische apparatuur. Gooi elektrische apparatuur nooit in het vuur.

! Testfouten

Fout bij registratie

Er is een fout opgetreden tijdens het testen. Het volgende kan zijn gebeurd:

- het absorberende uiteinde werd niet omlaag gehouden
- de test werd niet plat neergelegd nadat de urine werd aangebracht
- er werd te veel of te weinig urine aangebracht op het uiteinde

Gebruik een nieuwe test om opnieuw te testen en volg daarbij nauwkeurig de instructies.

Leeg venster

Als het aftelscherm niet is verschenen na de test of als het aftelscherm werd opgestart maar het venster daarna leeg werd, moet u een nieuwe test uitvoeren. Gebruik een nieuwe test om opnieuw te testen en volg daarbij nauwkeurig de instructies.

www.clearblue.com

Onze adviseurs zijn aanwezig van ma t/m vrij van 8-16 uur, behalve op feestdagen.

0800 394 9031 Oproepen zijn gratis.

Alle telefoongesprekken worden opgenomen en kunnen voor kwaliteitsdoelinden afgeluisterd worden. Houd het product en de verpakking alstublieft, inclusief eventuele folieverpakkingen, bij de hand wanneer u belt. Als een Nederlandsestalige medewerker niet beschikbaar is, helpt ons Engelstalige team u graag verder.

Voor thuis zelf testen. Enkel voor *in vitro* diagnostisch gebruik. Niet voor inwendig gebruik. Niet hergebruiken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bewaren tussen 2 en 30 °C. Als u het product in de koelkast bewaart, moet u het vóór gebruik gedurende 30 minuten op kamertemperatuur laten komen. Niet gebruiken als de folieverpakking beschadigd is. Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum. Dit product bevat batterijen. Bevat kleine onderdelen. Geen onderdelen van dit apparaat opeten. Zoek medische hulp als u delen van dit apparaat per ongeluk inslikt. Gooi het product weg in overeenstemming met de plaatselijke afvalstoffenverordening. Maak bij Clearblue melding van letsel dat wordt veroorzaakt door het gebruik van dit product.

78% van de uitslagen 'Zwanger' kunnen 6 dagen vóór uw gemiste menstruatie worden gedetecteerd (5 dagen voordat uw menstruatie zou moeten beginnen).

Dit IVD digitale apparaat voldoet aan de vereisten voor emissie en immuniteit van EN 61326-2-6. De EMC-tegenmaatregelen die in dit elektronische instrument zijn gebruikt, geven een redelijke bescherming tegen de effecten van elektromagnetische interferentie die vaak in de thuisomgeving voorkomt. De volgende preventieve waarschuwingen zijn van toepassing op apparatuur die voldoet aan EN 61326-2-6.

a) Gebruik van dit instrument in een droge omgeving, in het bijzonder wanneer hier synthetische materialen aanwezig zijn (synthetische kleding, tapijten etc.), kan schadelijke statische ontladingen veroorzaken die tot foutieve uitslagen kunnen leiden.

b) Gebruik dit instrument niet in de buurt van bronnen met sterke elektromagnetische straling (bijvoorbeeld mobiele telefoons), aangezien deze de juiste werking van de test kunnen verstoren.

LOT	Batchcode	IVD	<i>In vitro</i> diagnostisch medisch apparaat	Fabrikant
Uiterste gebruiksdatum	Temperatuurbeperingen 2 °C - 30 °C	Niet openen	Niet hergebruiken	

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), 2300587.02 11-2020
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Zwitserland.

Clearblue is een handelsmerk van SPD.
© 2020 SPD. Alle rechten voorbehouden.

